




107年病安護理創新競賽 作品分享

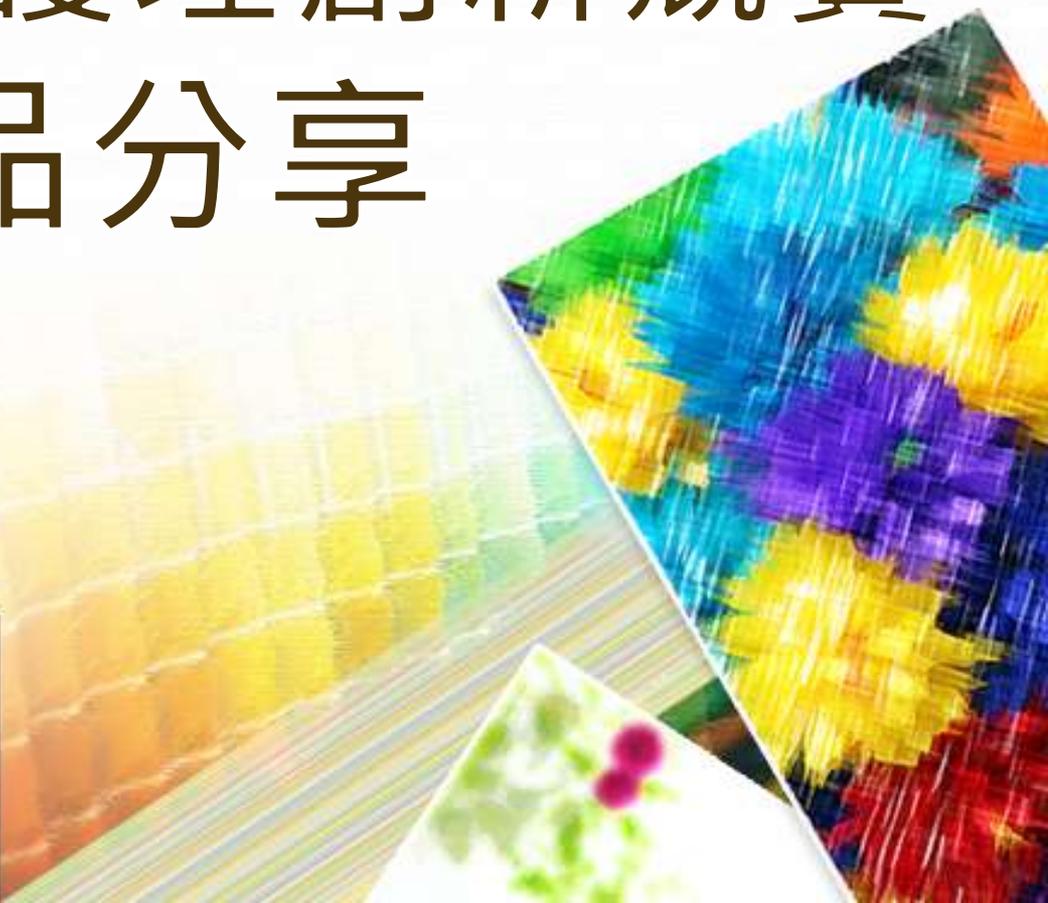

107年病安護理創新得獎名單

獎金將直接匯入貴單位提供之薪資帳戶

單位	題目	姓名	獎項
HP	叭噗水龍頭	陳婉柔、許盈玥、陳芊廷、王素鴻	第一名
第五加護病房	甲你攬牢牢	王雅玫、盧珠琴、劉佳玲	第二名
IR	我不是上帝，但我可以幫你開一扇窗	吳春霞、王淑娟、張育瑄	第三名
M9	防脫約束褲	黃齡禎、陳昕妤、張雅惠、張鶯蘭	佳作
第一加護病房	加油約束棒	吳琳雅、陳宥真	佳作
PSY	拉拉手—微笑不拉扯，約束小幫手	曾嘉雯、陳筱惠、陳盈君	佳作
OR	好好溝通—光明大聲公	林方瑜、許淑麗、張淑華、曾雅庭、 蔡宛竹、張雅慈、范玉靜、施淑真、 洪嘉君、曾筱娟、陳濼瓊	佳作
RCC	髮網恢恢，舒耳不sore	楊智琬、林淑旻、賴喬郁	佳作

導尿管固定器-SI

- 用物準備

- 一片厚型人工皮(小)
- 一把剪刀
- 兩個電線收集器(一大一小)



- 先用剪刀將人工皮剪下長約8公分寬約5公分大小的底座
- 再將人工皮及集線器固定



將大的集線器卡入導尿管上方，小的集線器卡入導尿管及尿袋接頭處下方，再將人工皮貼於病患身上，即完成人工皮固定器固定存留導管

S形耳掛勾-中興HD



用彈力拉繩測量，
從三角窩到耳垂，
再使用軟式鋼絲摺
成S形狀，並使用布
膠纏繞在軟式鋼外
依病人耳朵形狀，
調整掛勾，掛在病
人耳朵上面，S下勾
以紗布及布膠黏貼
即完成。



防脫約束褲-M9



舒適內褲



針線包



管路收納袋



鼠蹊部導管保護套-CCU

在大腿鼠蹊部，包覆有彈性且有緊度的保護套，讓病人就算扭動或移動肢體，勉強接觸到管路置入處，仍無法直接接觸管路或是拉扯管路的動作


作品及改良流程



鼠一鼠二斤斤繫腳-R10



使用彈性布料包覆3kg沙袋並使用魔鬼氈調整窄寬，可依病人體型使用正確加壓及固定於傷口處，並於腰部增加軟墊做為支撐物，可減少長時間平躺使腰部懸空造成乳酸堆積致痠痛不適

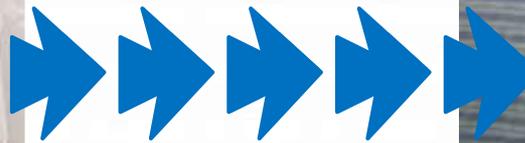

無痛式集尿袋之3條固定法-ER



將兩條黑色鬆緊固定帶分別穿過缺口處，以魔鬼氈固定於大腿，並將生殖器置入集尿袋後，以小條白色鬆緊固定帶之魔鬼氈固定於陰莖

髮網恢恢，舒耳不sore-RCC



躁動病人可將原本綠線固定面罩後
向上綁著頭部網套加強固定

整齊棒-OPD

*讓導線夾有固定的家

- * 防撞護條材質特性輕巧(30元)
- * 熱縮套管7支(20元)
- * 白膠(15元)
- * 美工刀



65元可以做3組
平均1組22元

*使用方法

- * 導線依序插入分隔線
 - * 每一條導線病人端都有兩個導線夾
 - * 使用完依序放入導線夾回收孔中，
可確保已將毫針卸除。
- ## *可以快速跟上錦然有序



好磅磅改良式坐磅-HID


- 不鏽鋼材質扶手易滑、支撐力差



- 使用防滑材質的握把布，增加扶手防滑度



我不是上帝，但我可以幫你開一扇窗-IIIQ

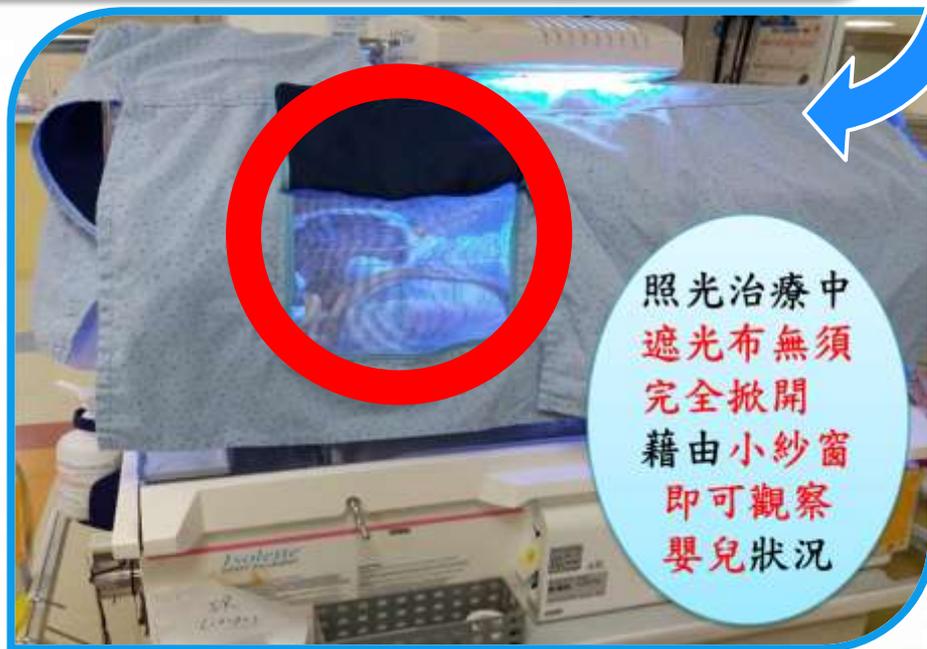

甲你攬牢牢-NI

創新包裹巾以純棉保暖度佳的材質為基底，達到安全、保暖及配置導線方便監測生命徵象變化，且因應嬰幼兒妊娠週數及出生體重的差異，提供兩款不同大小的包裹巾，採用魔鬼氈及綁帶方式，可更加緊密牢靠避免運送中掙脫，並確實達到保暖效果，材質可重複使用及方便清洗。



雙腳入袋



枕頭軟墊
氧氣連接管固定




左右兩片緊密包覆綁帶及魔鬼氈加強



拉拉手-微笑不拉扯，約束小幫手-PSY

使用工具

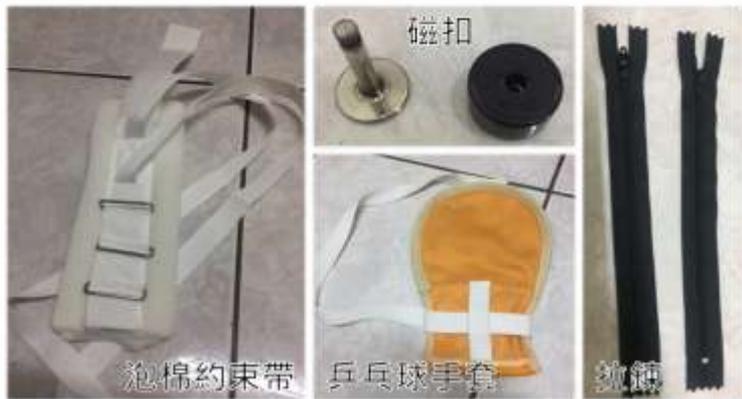

泡棉約束帶和乒乓球手套合為一體
改以磁扣固定 / 細綁繩改為寬版固定帶

省時

舒適

磁扣固定
簡易快速
受壓面積大
壓力減少



綁繩固定
纏繞費時
受壓面積
集中壓力
增加

乒乓手套前端縫上雙向拉鍊

便利



監測、評估、操作技術更便利

選用材質較為
柔軟厚實且
親膚的泡綿

舒適



乒乓球手套固定
板改為可拆卸式
利清洗少異味

加油約束棒-MI

傳統約束帶與叮噹拍結合

加油約束棒!



優點

1. 限制病人有抓握的動作
2. 符合病人手部形狀使其有適當的空間活動

靈感來自： 動物保護頭套

運用相似的方法於臨床上，不但通風，病人也能自由活動手腕，卻無法抓起周圍的物品

01

挑選材質



選擇可以調整大小、長度、鬆緊，且黏性佳、材質為醫療級且好清洗的寵物頭套當作創新的約束手套

02

頭套結合約束帶



將魚眼約束帶的魚眼部分裁除，縫於約束套上方，可以快速在短時間內完成約束，並可視病人情況固定於床體

03

減壓海綿



加入泡棉可減輕不適感，透過魔鬼氈，可隨時更換泡棉，不但衛生，且方便清潔

04

網套



網子能輕鬆的套至「加油約束棒」上方，可完善預防觸碰管路，旁邊的魔鬼氈可增加黏性，可視情況套用



媽咪!妳擠了沒?-R09




步驟一
準備用物



步驟二
打草稿



步驟三
裁剪雲彩紙
做底盤增加
硬度

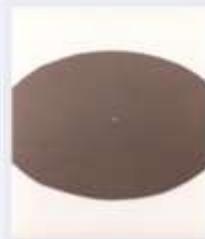

步驟四
裁剪圓形底
盤2個並與
雲彩紙相黏



步驟五
裁剪八等分
時間圓形圖



步驟六
製作假乳頭
並用雙腳釘
貫穿



步驟七
雙腳釘分
開固定



步驟八
背面增加可
固定插卡的
紙張



步驟九
放入可移動
式登記乳量
小卡



步驟十
裁剪小手，
放置在正確
手擠乳位置



步驟十一
增加指針指
標來，予以
提醒



步驟十二
完成，
依個別性時
段操作

胸腔引流瓶計量尺-N14

材料:

1. 透明塑膠軟片
2. 奇異筆
3. 剪刀
4. 軟性磁鐵



步驟一



將透明塑膠軟片放在胸腔引流瓶上畫上刻度。

步驟二



畫好刻度後將軟性磁鐵剪出長條適合之長度貼在背面。

步驟三




用透明塑膠軟片裁出2x20cm大小。

步驟四



將強力磁鐵貼在步驟三的透明塑膠片上。


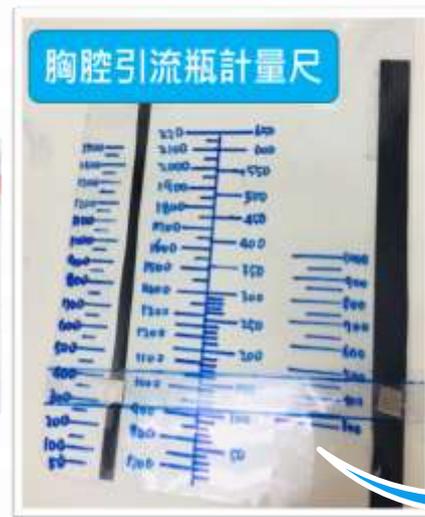


After

好好溝通—光明大聲公—OR

*製作材料：

- * 透明蛇形管
- * 剪刀、膠帶
- * 加油棒
- * 四切、襪套

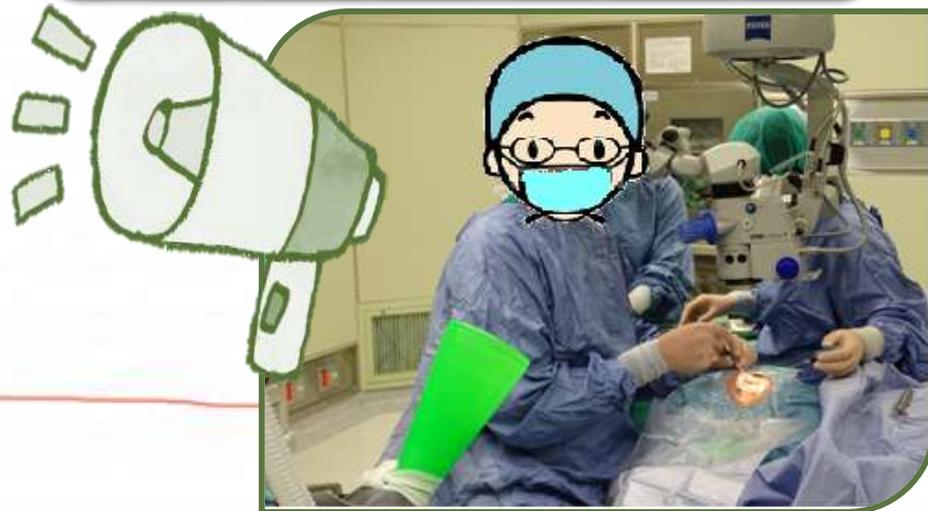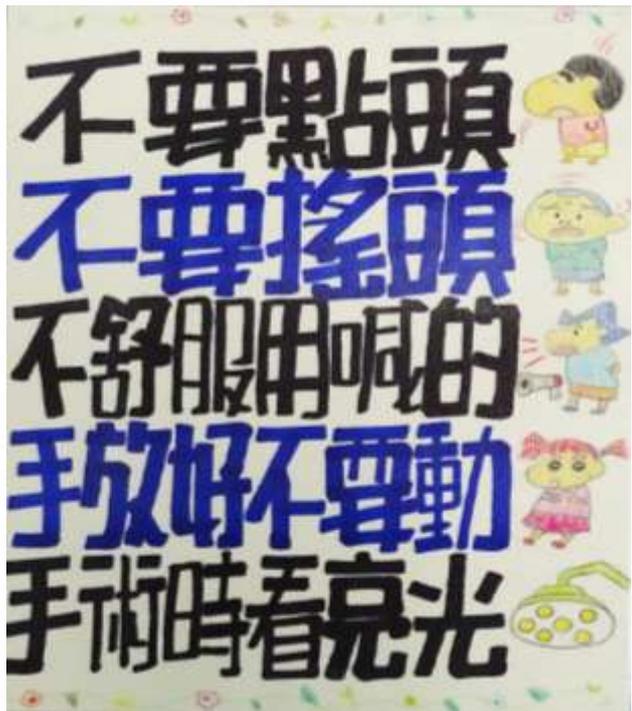

叭嘆水龍頭-HP



洗頭百寶袋

1. 叭嘆水龍頭
2. 摺疊水桶(大)
3. 摺疊水桶(小)
4. 洗頭槽
5. 茄芝袋



- ☹️ 尾端過濾網太輕，易浮出水面，導致氣體進入吸球內影響出水量
- ☹️ 過濾網易生鏽，影響出水品質



將水往高處吸取
避免彎腰取水

將「釣魚取水器」末端「過濾網」取下，接上「洗衣機給水接頭」

