

筆型胰島素注射器 的使用介紹



***提醒：於空腹抽血前勿注射胰島素**

衛教單張



衛教影片



生效日期：106/01/04
檢閱日期：114/12/04

修正日期：113/10/15
編號： T-Adult-179



筆型胰島素注射器 的使用介紹

1. 洗淨雙手並擦乾



2. 用物：筆型胰島素、針頭、酒精
棉片、針頭收集硬筒




3. 拔掉筆蓋



4. 若使用預混型胰島素（濁）必須混
合均勻再使用，非預混型則略過此
步驟

(1) 將筆管放在手掌心滾動 10 次

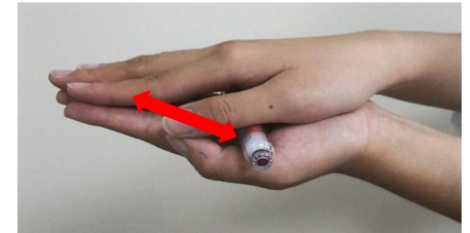

(2) 再上下擺動 10 次，直到液體呈
現均勻白霧狀為止



5. 裝置針頭

(1) 以酒精棉片擦拭橡皮膜



(2) 撕開針頭保護蓋，並將針頭轉緊



(3) 取下針頭外蓋及內蓋



6. 排氣：(只有首次使用才需要)

(1) 將劑量轉 1-2 單位，針頭朝上
按鈕推到底，以排除氣泡



(2) 如已使用中的胰島素 (不用每次排空氣)，每次裝針後先確認針頭是否有藥水珠產生，即代表注射筆針可正常運作



7. 將注射鈕轉至欲打的胰島素單位



8. 以酒精棉片消毒預施打部位
(詳見胰島素注射部位的衛教單)



9. 將針頭 90 度插入預施打的部位



10. 按下底部按鈕將劑量壓到底歸零後，至少停留 15-20 秒後再拔出



11. 將用過的針頭投入寬口、堅固的硬筒後，再洗手

12. 將針頭丟棄在收集硬筒約 8 分滿後，請整筒帶回醫院的藥局、檢驗室統一處理



筆型胰島素注射器 的保存方法

未使用的筆型胰島素：放置冰箱冷藏



已使用的筆型胰島素：放置陰涼處

(效期 1 個月)



中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

